

「果実飲料の酸度」は自動滴定で！

自動滴定による測定方法は、日本農林規格（JAS）に規定されています。

自動滴定装置 TITRA-A16

10.1インチ タブレットPC採用

だれでも
カンタン



高い精度で測定します

個人誤差がありません。
計算ミスもありません。


測定は自動です

測定中は他の仕事ができます。
測定終了はアラームでお知らせ。


測定時間の短縮も可能です

あるポイントまで一気に標準液を
滴加することで時短もできます。
処理件数アップにつながります。

【ブランク測定結果】

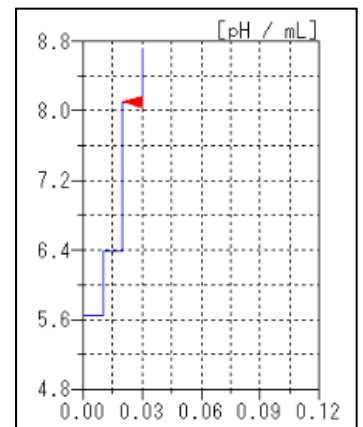

【サンプル測定結果】

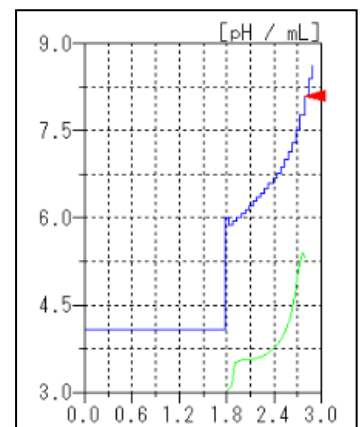

【オレンジジュースの酸度測定結果例】

No.	試料量(g)	滴定値(mL)	酸度(%)
1	2.6210	2.782	0.678
2	2.5853	2.743	0.677
3	2.5920	2.751	0.678
		平均値	0.678%
		標準偏差	0.001%
		変動係数	0.085%

測定手順は 3 ステップ!

試料を
ビーカーに採取

純水を
加える

電極を浸漬して
滴定キーを押す

終了

用途と予算に合わせたラインアップをご用意



リーズナブル

COM-300AT
¥695,000~



タッチパネル

COM-1700AS
¥1,175,000~



タブレットPC

TITRA-A16ST
¥1,200,000~
(電極別)



12検体
連続測定

COM-1700ASC12
¥2,015,000~

※記載の価格には、消費税、据付費は含まれておりません。

まずは無償デモでお試しを!

装置の開梱・据付・説明・返却、全てお任せください

平沼産業株式会社

本社・工場 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1739

TEL (029) 247-6411(代) FAX (029) 247-6942

東京営業所・大阪営業所・名古屋営業所

お問い合わせは—